


Liquoruntersuchungen INS

Donas, Stocker, Hauri, Büttcher
Stand: 08/2017

MATERIAL:

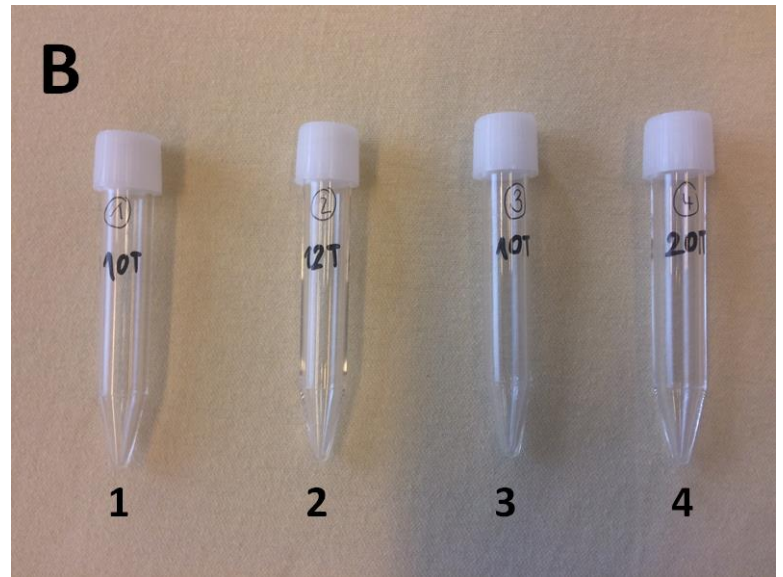

A Medium Liquor (Kühlschrank) 5 Tropfen (Nur 1 Medium, Schokolade-Agar); Laborblatt Mikrobiologie

- B 1. Röhrli 10 Tropfen: "Meningitis/Encephalitis DNA/RNA"
(Mikrobiologie Erregernachweis, Rückseite)
mind. 6 Tropfen: "Enteroviren RNA" (Mikrobiologie Erregernachweis, Rückseite)
2. Röhrli 12 Tropfen; Laborblatt Urin
Albumin, Gesamtprotein, Glukose, Lactat
3. Röhrli 10 Tropfen; Laborblatt Morphologie
absolutes Minimum 6 Tropfen Zytologie (Zellzahl, Zelldifferenzierung)
4. Röhrli 20 Tropfen Reserve (ad Mikrobiologie)
Gelbe Markierung: Lagerung 4 Wochen

HINWEISE:

- Bei geringer Liquormenge: Reihenfolge Priorität: A > B3 > B2 > B1 > B4
- Bei blutig tingiertem Liquor: B3 (wenn möglich) als letztes Röhrli abnehmen
- Glukose im Blut und Liquor muss möglichst parallel entnommen werden

VORGEHENSWEISE:

